РОССИЯ

Облучатель-рециркулятор бактерицидный типа ОР-УФ модели ОР-УФ-600 СО

(ТУ 27.40.15-080-64046643-2020)

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации

ООО «ПищТех», г. Краснодар, 2024 г.

В процессе производства конструкция и устройство изделия могут быть изменены в целях усовершенствования и отличаться от описанных в данном руководстве, не ухудшая потребительских свойств.

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и лиц, производящих установку и техническое обслуживание облучателя-рециркулятора бактерицидного с устройством, принципом действия и другими сведениями, необходимыми для его установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Перед началом работы следует внимательно изучить данное руководство по эксплуатации. При использовании облучателя-рециркулятора необходимо обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию ультрафиолетового бактерицидного облучателя и строгое соблюдение требований настоящего руководства.

При вмешательстве в работу облучателя-рециркулятора возможны нарушения в его работе и риск нанесения травмы. В этом случае производитель не несёт никакой ответственности за негативные последствия такого вмешательства.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор бактерицидный типа ОР-УФ (далее изделие, рециркулятор) предназначен для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфекций: лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, производственных и общественных организациях и других помещениях с большим скоплением людей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные изделия приведены в таблице № 1

Таблица №1

№	Наименование параметра	Величина параметра
1	Модель	**ОР-УФ-600СО**
2	Количество бактерицидных ламп, шт	20
3	Потребляемая мощность, Вт	700
4	Номинальное напряжение, В	230
5	Номинальная частота тока, Гц	50
6	Длина волны, нм	253,7
7	Срок службы ламп, ч	9000
8	УФ-С излучение одной лампы, Вт	10
9	Производительность вентилятора, $м^3$/ч	1900
10	Объем помещения (при времени обработке 1 час), $м^3$*	1000
11	Габаритные размеры, мм длина ширина	 710 840

	высота	1680
12	Масса, кг, не более	60

*Величина ориентировочная, зависит от категории и проходимости помещения, длительности обработки, необходимой бактерицидной эффективности в отношении определенных микроорганизмов и вирусов.

Приведенные в таблице показатели достижимы только при следующих условиях: температура окружающей среды — 20-25°С и относительной влажности воздуха окружающей среды — 45-80%.

Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица №2

Наименование	**Количество**
	ОР-УФ-600СО
Облучатель-рециркулятор бактерицидный, шт.	1
Подставка, шт	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Упаковка, шт.	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Бактерицидный рециркулятор - это устройство закрытого типа, которое предназначено для обеззараживания воздуха (уничтожения вирусов, бактерий, инфекционных микроорганизмов) при помощи бактерицидного эффекта ультрафиолетовых лучей с длиной волн 253,7 нм . Эффективность работы достигает 99%. Главное отличие рециркулятора от бактерицидного облучателя(кварцевой лампы) открытого типа заключается в безопасном использовании в присутствии людей, животных и растений.

В рециркуляторе установлены бактерицидные ультрафиолетовые лампы из увиолевого стекла, которое пропускает преимущественно ультрафиолетовое излучение с длиной волны, не вызывающей образование озона в воздухе.

В бактерицидном рециркуляторе установлена безозоновая бактерицидная лампа. Но следует помнить, что и она способствует образованию малого количества озона, концентрация которого безопасна для человека. Во время работы или после выключения рециркулятора проветривать помещение нет острой необходимости, но рекомендуется для усиления эффекта обеззараживания воздуха. Для профилактики рециркулятор рекомендуется включать на 2 часа в день. В период вспышек заболеваемости можно оставлять включенным на весь день.

Корпус рециркулятора выполнен из углеродистой стали окрашеной порошковой краской, поэтому излучение не поступает наружу. Вентиляционные отверстия снизу и сверху защищены лабиринтами и решеткой. Окружающие люди, животные и растения не контактируют с излучением, поэтому рециркулятор абсолютно безопасен.

Бактерицидный рециркулятор относится к устройству закрытого типа. В этом случае происходит кварцевание только воздуха (за исключением поверхностей). Воздушный поток из помещения прокачивается вентиляторами через корпус рециркулятора, где установлены бактерицидные лампы. Воздух обрабатывается ультрафиолетовыми лучами, которые разрушают болезнетворные микроорганизмы на молекулярном уровне. Через верхнее отверстие очищенный воздух выходит обратно в помещение. Установленная лампа внутри корпуса работает до 9000 часов. По истечении срока службы бактерицидный поток лампы ослабнет, и ее потребуется заменить на новую.

Общий вид облучателя-рециркулятора ОР-УФ-600СО приведен на рис.1.

Корпус облучателей изготовлен из углеродистой стали марки Ст3 толщина 0.8-1,2 мм, окрашенной порошковой краской. Облучатель состоит из основания, держателя и крышки. Крышка рециркулятора плотно прилегает к корпусу за счет уплотнения. Спереди расположен выключатель и кабель. Рециркулятор установлен на сварную подставку изготовленную из трубы 40х40 Ст3. Снизу подставки установлены поворотные колеса диаметром 100, два из которых с тормозом. Для замены лампы необходимо отключить рециркулятор, открутить винты спереди и сзади и снять крышку. Лампа извлекается из цоколя после поворота на 90 градусов.

Категорически запрещается включать облучатель-рециркулятор со снятой крышкой. При попадании на открытые части тел человека и животных (особенно глаза), бактерицидное излучение вызывает сильные ожоги. Не допускайте нахождение людей и животных под прямым светом бактерицидной лампы.

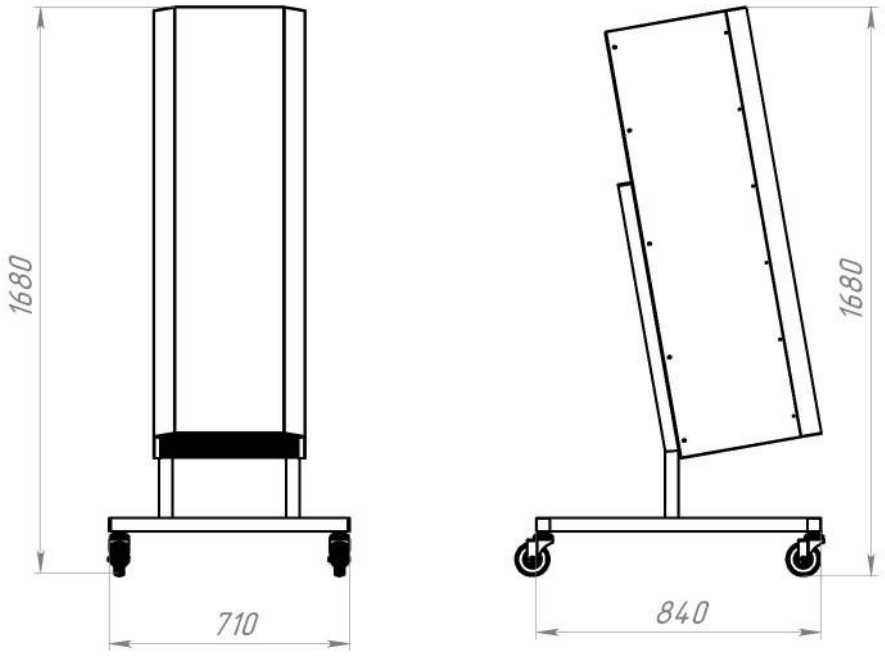


Рис.1 Общий вид облучателя-рециркулятора бактерицидного ОР-УФ-600СО.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установку, наладку и техническое обслуживание должны производить специалисты завода или специализированная организация, имеющая договор с заводом и лицензией на

монтаж и ремонт торгово-технологического оборудования и имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III. Пуско-наладочные работы и обучение производятся за отдельную плату.

Распаковка, установка и испытание облучателя должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

После проверки состояния упаковки следует распаковать облучатель. Провести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2 руководства.

После транспортировки и хранения при отрицательной температуре, перед началом использования, облучатель необходимо выдержать в помещении при комнатной температуре не менее 6-ти часов.

Облучатель устанавливается только на подставку.

Рециркулятор поставляется в собраном виде и не требует дополнительной сборки.

Место выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить беспрепятственное распространение воздушного потока обеззараженного воздуха.

Подключение облучателя к электросети осуществляется с учетом допускаемой нагрузки. Розетка должна иметь заземляющий контакт и подходить к вилке рецеркулятора по мощности и напряжению.

Проверить целостность и надежность электропроводки и заземления. Подать электропитание на рециркулятор через выключатель.

Если рециркулятор не используется несколько дней, необходимо отключить его от сети в распределительном щитке.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация бактерицидных рециркуляторов должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации.

К эксплуатации и обслуживанию бактерицидных установок не должен допускаться персонал, не прошедший необходимый инструктаж в установленном порядке, проведение которого следует задокументировать.

Эксплуатация рециркулятора должна проходить в соответствии с рекомендациями руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

Бактерицидный рециркулятор-облучатель не должен использоваться в помещениях с горючим газом или взрывоопасными веществами.

После использования в замкнутом пространстве и выключения облучателя необходимо проветрить помещение, чтобы исключить скопление озона.

Необходимо проводить очистку колб ламп и отражателей облучателей от пыли, согласно графику, утвержденному в установленном порядке. Периодичность очистки устанавливается в соответствии с табл.3 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Работы по очистке, техническому обслуживанию, ремонту можно проводить только при отключенной сети.

В случае нарушения целости бактерицидных ламп в облучателе и попадания ртути в помещение должна быть проведена тщательная демеркуризация помещения с привлечением специализированной организации в соответствии с МУ № 4545-87 "Методические рекомендации по контролю за организацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке ее эффективности".

Бактерицидные лампы с истекшим сроком службы или вышедшие из строя, должны заменяться на новые. При замене ламп необходимо использовать перчатки. Бактерицидные лампы, отработавшие срок службы или вышедшие из строя, хранить запакованными в отдельном помещении. Утилизация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с установленными требованиями ("Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов", утверждены приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.88 № 120).

Все помещения с бактерицидными установками, действующими или только вводимыми, должны иметь акт ввода их в эксплуатацию и журнал их регистрации и контроля.

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается включать облучатель-рециркулятор со снятой крышкой. При попадании на открытые части тел человека и животных (особенно глаза), бактерицидное излучение вызывает сильные ожоги. Не допускайте нахождение людей и животных под прямым светом бактерицидной лампы.

Категорически запрещается:

- изменять электрическую схему, менять конструкцию;
- перекрывать отверстия входи и выхода воздуха;
- оставлять детей без присмотра рядом с работающим рециркулятором;
- использовать розетки, переходники, адаптеры и т. д. не соответствующие требованиям электробезопасности.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III – V разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьего.

ВНИМАНИЕ! При техническом обслуживании и ремонте рециркулятора выключить автоматический выключатель в стационарной проводке и вывесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»

В процессе эксплуатации рециркулятора необходимо выполнять следующие виды работ в системе «технического обслуживания и ремонта»:

ТО – регламентированное техническое обслуживание – комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности оборудования;

ТР – текущий ремонт – ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности рециркулятора состоящий в замене и (или) восстановлении его отдельных частей и их регулировании.

Техническое обслуживание и ремонт рециркулятора осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:

« ТО-1 » - « ТО-1 » - « ТО-2 »,

где: ТО-1 - техническое обслуживание проводится 1 раз в месяц.

Перечень выполняемых работ при ТО-1:

- выявить неисправности изделия, опросив обслуживающий персонал;
- подтянуть и зачистить, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей изделия;
- подтянуть, при необходимости, крепление сигнальной арматуры, облицовок;

- проверить целостность оболочки шнура питания;

- проверить целостность электропроводки, заземления внешним осмотром;

- проверить сопротивление цепи заземления. От зажима заземления до доступных металлических частей сопротивление цепи заземления изделия должно быть не более 0,05 Ом.

- произвести при необходимости замену вышедших из строя комплектующих изделий;

Перед проверкой контактных соединений, заменой ламп и электронного пуско-регулирующего аппарата (ЭПРА) отключить изделие от электросети выключением автоматического выключателя цехового щита, повесить на рукоятку коммутирующей аппаратуры плакат «Не включать - работают люди».

Периодически, 1-2 раза в неделю, производить очистку корпуса облучателя теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной pH среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

Содержание работ при регламентированном техническом обслуживании приведены в таблице 3.

Таблица №3

Наименование	**Метод проверки**	**Технические требования и параметры**
Техническое состояние креплений лампы, ЭПРА, облицовки корпуса.	Визуальный осмотр	Механически надежно закреплены.
Состояние контактных соединений токоведущих частей и заземления	Произвести чистку	Контактное соединение токоведущих частей и заземления должно обеспечивать надежность контактов.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ И УСТРАНЕНИЯ

Все неисправности, вызывающие отказ, указаны в таблице 4

Таблица 4

Наименование неисправности	**Возможная причина**	**Способ устранения**
Лампа не загорается.	Отсутствует напряжение на вводе. Неправильное подключение к электрической сети.	Подать напряжение Проверить соединение к электрической сети.
Лампа мигает или не загорается	Вышла из строя лампа Вышел из строя ЭПРА	Заменить лампу Заменить ЭПРА
Вентилятор не работает	Вышел из строя вентилятор	Заменить вентилятор

9. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Для транспортировки облучатель-рециркулятор бактерицидный упакован в картонную коробку. Эксплуатационная документация уложена внутрь коробки.

Транспортировка рециркулятора допускается любым видом транспорта в закрытом объеме с соблюдением правил перевозок, действующих на каждом виде транспорта.

Погрузка и разгрузка рециркулятора из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

Хранение рециркулятора должно осуществляться в транспортной таре завода-изготовителя по группе условий хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Изготовитель гарантирует соответствие облучателя-рециркулятора бактерицидного всем требованиям технических условий ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы облучателя бактерицидного не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется произвести замену дефектного изделия на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Лампы являются расходным материалом и гарантийные обязательства на них не распространяются

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРИ:

1. **Неправильном подключении облучателя**
2. **Несоблюдении правил эксплуатации**
3. **Наличии механических повреждений облучателя**
4. **Внесении изменений в конструкцию облучателя и в коммутации электросоединений.**

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОР-УФ-600СО соответствует техническим условиям ТУ 27.40.15-080-64046643-2020 и признан годным к эксплуатации.

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Подписи лиц, ответственных за приемку:

Сборку изделия произвел _____

Подключение изделия (эл. часть) произвел _____

Контроль сопротивления заземления произвел _____

Контроль качества изделия произвел _____

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОР-УФ-600СО упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией ООО «ПищТех».


Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

Изделие после упаковки принял _____

Схема электрическая принципиальная

«ОР-УФ-600СО

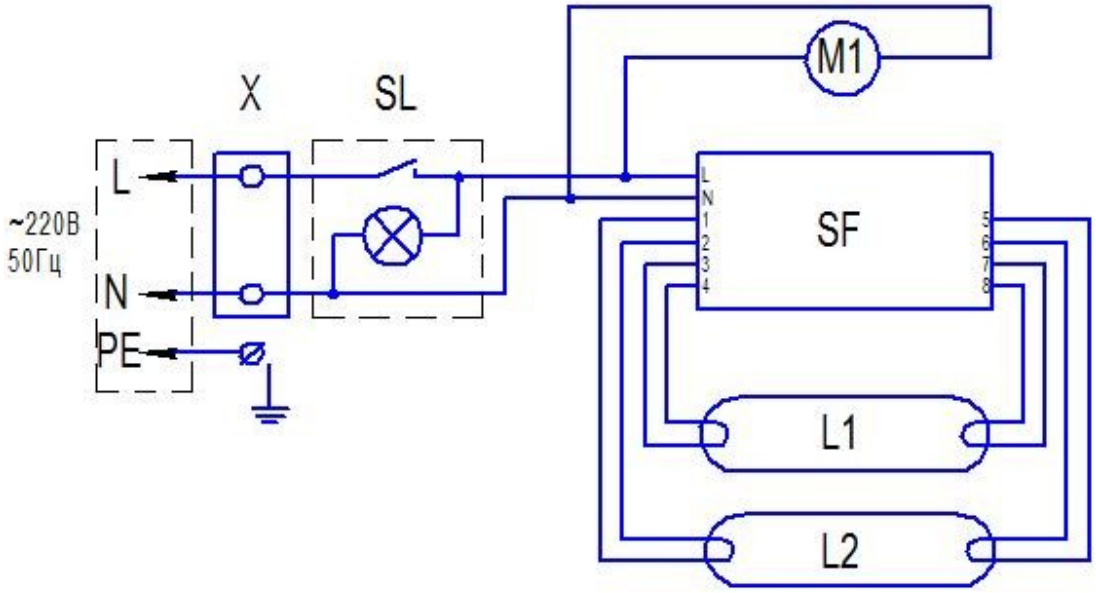

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
L1, L2	Лампа бактерицидная 30 Вт	20
SF	T8 Ballast	10
X	Блок зажимов винтовой 2504	1
S1	Клавишный выключатель 220В 15А	1
M1	Вентилятор DOSSY DS12038ABHL	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

1. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75732/23

2. Изготовитель: ООО «ПищТех»
   юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,14
   факт. адрес: 353211, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского,1/2

3. Перечень авторизованных сервисных центров компании
   ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома)	+7 (861) 241-17-00 +7 (988) 594-86-06 +7 (861) 241-10-29 service@zavod-pt.ru
г. Самара	Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт	+7 (846) 922-52-17 samara@zavod-pt.ru
г. Сочи	ул. Донская, д. 9	+7 (862) 235-11-25 sochi@zavod-pt.ru
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д. 30	+7 (343) 272-82-12 ekt@zavod-pt.ru

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству и за консультацией обращаться по адресу:

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,
350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1,
+7 (861) 228-98-25, доб. 155 +7 (988) 594-86-06,
service@zavod-pt.ru

Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта	
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д. 30	+7 (343) 272-82-12	ekt@zavod-pt.ru
г. Красноярск	ул. 9 Января, д. 23	+7 (391) 231-65-00	kry@zavod-pt.ru
г. Новосибирск	пер. Комбинатский, д. 3, корп. 4	+7 (383) 239-50-87	nsk@zavod-pt.ru
г. Ростов-на-Дону	ул. Вавилова, д. 68	+7 (863) 311-59-25 +7 (918) 555-91-70 +7 (989) 620-45-79	rnd@zavod-pt.ru rnd3@zavod-pt.ru
г. Саратов	ул. Астраханская, д. 43, корп. 5	+7 (845) 244-81-94	saratov@zavod-pt.ru
г. Ставрополь	ул. Октябрьская, д. 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корп.	+7 (918) 869-79-79	stv@zavod-pt.ru
г. Волгоград	ул. Чистоозерная, д. 6	+7 (844) 298-73-13	volg@zavod-pt.ru
г. Казань	ул. Журналистов, д. 54	+7 (843) 226-87-84	kazan@zavod-pt.ru
г. Люберцы	ул. Электрификации, д. 26 В	+7 (495) 227-73-50	moscow@zavod-pt.ru
г. Оренбург	ул. Монтажников, д. 21	+7 (3532) 45-74-74	orenburg@zavod-pt.ru
г. Самара	Заводское шоссе, д.111, ТЦ ДиПорт	+7 (846) 922-52-17	samara@zavod-pt.ru
г. Омск	ул. Енисейская, 1Г (1Б к4)	+7 (3812) 20-90-77	omsk@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, д. 24	+7 (473) 232-36-06	vobs@zavod-pt.ru
г. Краснодар	Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома)	+7 (861) 241-10-26 +7 (861) 241-10-27 +7 (861) 241-10-28 +7 (918) 348-61-97 +7 (918) 290-25-85	tz@zavod-pt.ru – оборудование tr@zavod-pt.ru –мебель и магазиностроение storchak@zavod-pt.ru - посуда at@zavod-pt.ru – онлайн-кассы и автоматизация zip@zavod-pt.ru – запасные части
г. Краснодар	ул. Уральская, д.126/4	+7 (918) 240-03-96	zakaz3@zavod-pt.ru
г. Нижний Новгород	ул. Бекетова, д. 13П	+7 (831) 424-20-15	nn@zavod-pt.ru
г. Пятигорск	ул. Ермолова, д.16, строение 1	+7 (918) 768-39-13	ptg@zavod-pt.ru
г. Санкт-Петербург	ул. Софийская, д. 14, литер А	+7 (812) 921-31-17	spb@zavod-pt.ru
г. Сочи	ул. Донская, д. 9	+7 (862) 235-11-25	sochi@zavod-pt.ru
г. Уфа	ул. Ростовская, д. 18	+7 (347) 294-46-36	ufa@zavod-pt.ru
г. Алматы	ул.Муратбаева 63 (угол улицы Макатаева)	+7(727) 753-34-34 +7(727) 351-60-61	kz@zavod-pt.ru
г. Бишкек	ул. Лермонтова, д. 12	+996 (500) 44-99-77 + 996 (555) 44-99-77 +996 (312) 97-35-70	kg6@zavod-pt.ru kg3@zavod-pt.ru
г. Симферополь	ул. Бородина, д. 12 лит.З	+7 (978) 972-42-99	krim2@pt-proekt.ru krim3@pt-proekt.ru
г. Ташкент	Учтепинский район, улица Фархадская, 8 блок	+998 (99) 353-47-71 +998 (99) 353-47-72 +998 (99) 353-47-73	uz@zavod-pt.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩТЕХ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 350033, Россия, край Краснодарский, г. Красподар, ул. Ставропольская, Д. 14, Литер Б , Офис 7
Адрес места осуществления деятельности: 353211, Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Луначарского, дом 1/2
Основной государственный регистрационный номер 1102308000640.
Телефон: +7 (861) 241-17-00 Адрес электронной почты: ta@zavod-pt.ru
в лице Генерального директора Чистякова Евгения Владимировича
заявляет, что Облучатель - рециркулятор бактерицидный типа ОР-УФ.
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩТЕХ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 350033, Россия, край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Ставропольская, Д. 14, Литер Б , Офис 7
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 353211, Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Луначарского, до1/2 45.2377298592535, 39.01026090941996
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.15-080-64046643-2020 Облучатель - рециркулятор бактерицидный типа: ОР-УФ.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8543708000
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № FT-0823-1612 от 21.08.2023 г.., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА»
(регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ06)
Схема декларирования соответствия: 1д
Дополнительная информация
Срок службы 10 лет указан изготовителем в документации на продукцию. Условия хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок хранения изделия не установлен.
Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.08.2026 включительно

М.П.

подпись

Чистяков Евгений Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.75732/23
Дата регистрации декларации о соответствии: 23.08.2023